


ri-san®

**Riester**

The familiar way

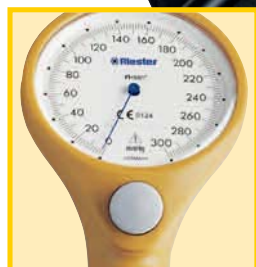

The **ri-san®** high-quality, palm-style sphygmomanometer is the embodiment of **ergonomic design**. The **air release valve** is conveniently regulated by **finger-tip control**. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Palm-style model, single-tube analog sphygmomanometer
- Latex-free bulb for pumping up the cuff
- Tube connection at the top of the pressure gage for unhindered blood pressure measurement
- Suitable for right or left handed users
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm, almost non-aging
- The precision movement guarantees reliable measurements
- Diaphragm can be pressurized up to 600 mmHg
- Easily legible scale Ø 64 from 0 to 300 mmHg
- Maximum error tolerance of +/- 3 mmHg
- In vinyl zippered case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

Ø 64 mm, single-tube

Cotton Bandage cuff, adult

Cotton hook cuff, adult

Calibrated nylon velcro cuff, adult

slate gray

Nr. 1510

Nr. 1511

Nr. 1512

blue

Nr. 1515

Nr. 1516

Nr. 1517

saffron

Nr. 1520

Nr. 1521

Nr. 1522

green

Nr. 1525

Nr. 1526

Nr. 1527

Konsequent **ergonomisches Design** zeichnet das hochwertige Einhand-Blutdruckmessgerät **ri-san®** aus. Das **Luftablassventil** lässt sich bequem **durch einfachen Fingerdruck regulieren**. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Einhandmodell 1-Schlauch-Zeiger-Blutdruckmessgerät
- Latexfreier Ball zum Aufpumpen der Manschette
- Steckschlauchanschluss oben am Manometer, für ungehinderte Blutdruckmessung
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützen Luftablassventil und Mess-System
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Das Präzisionswerk garantiert zuverlässige Messungen
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Gut ablesbare lineare Skala Ø 64 mm von 0 - 300 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg
- In Vinyl-Reißverschlusstasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Mans. Größen und -Ausführungen

Ø 64 mm, 1-Schlauch	schiefergrau	blau	safran	grün
Baumwoll-Wickelmanschette Erwachsene	No. 1510	No. 1515	No. 1520	No. 1525
Baumwoll-hakenmanschette Erwachsene	No. 1511	No. 1516	No. 1521	No. 1526
Kalibr. Nylon-Klettenmanschette Erwachsene	No. 1512	No. 1517	No. 1522	No. 1527

Un **design ergonomique** rigoureux caractérise **ri-san®**, le tensiomètre manopaire de haute qualité. Le **réglage** de la valve de décompression s'effectue confortablement, **par simple pression du doigt**. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

- Tensiomètre manopaire à cadran, à un tube
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Raccord emboîtable pour tubulure, situé sur la face supérieure du manomètre, pour une mesure non entravée de la tension artérielle.
- Conçu pour les droitiers et les gauchers
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Des microfiltres protègent la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Le mécanisme de précision garantit la fiabilité des prises de mesures
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Ø 64 mm, un tube	gris ardoise	bleu	safran	vert
Brassard enveloppant en coton, adulte	No. 1510	No. 1515	No. 1520	No. 1525
Brassard à crochets en coton, adulte	No. 1511	No. 1516	No. 1521	No. 1526
Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte	No. 1512	No. 1517	No. 1522	No. 1527

Un **diseño sistemáticamente ergonómico** es la principal característica del tensiómetro **ri-san®**, un aparato de alta calidad para usar con una sola mano. Y a un precio muy competitivo. La **válvula de purga de aire** se regula **cómodamente mediante una simple presión del dedo**. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Tensiómetro de reloj de 1 tubo para usar con una sola mano
- Pera sin látex para inflar el brazalete
- Unión enchufable para el tubo situada en la parte superior del manómetro, para no estorbar durante la medición de la tensión
- Apto para usuarios diestros y zurdos
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltros para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- El mecanismo de precisión garantiza mediciones fiables
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Escala lineal de lectura fácil, Ø 64 mm, 0-300 mm Hg
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg
- Funda de vinilo con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazalete

Ø 64 mm, 1 tubo	gris pizarra	azul	azafrán	verde
Brazalete de algodón arrollable, adultos	No. 1510	No. 1515	No. 1520	No. 1525
Brazalete de algodón con gancho, adultos	No. 1511	No. 1516	No. 1521	No. 1526
Brazalete de nylon calibrado, con velcro, adultos	No. 1512	No. 1517	No. 1522	No. 1527

Тонмометр **ri-san®** отличается **последовательным эргономичным дизайном**. С кнопочным спуском воздуха. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Модель 1 тонмометр со шлангом и стрелкой.
- Груша без латекса для накачивания манжеты.
- Гнездо для присоединения шланга сверху на манометре, что облегчает процесс измерения давления крови.
- Подходит для правой и левой.
- Незнашивающийся прецизионный спусковой клапан точной настройки.
- Микрофильтры защищают спусковой клапан и измерительную систему.
- Со специально отверждённой практически незнашивающейся медно берилловой мембраной.
- Прецизионный механизм гарантирует надежность измерений.
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.
- Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт. ст.
- Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт. ст.
- В виниловой сумке со змейкой.
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей.

Диаметр 64 мм, Одинарный шланг.	темносерый	синий	шафрановый	зеленый
Обматывающаяся манжета из хлопка для взрослых	No. 1510	No. 1515	No. 1520	No. 1525
Захватывающаяся манжета из хлопка для взрослых	No. 1511	No. 1516	No. 1521	No. 1526
Калибровочная нейлоновая манжета на липучке для взрослых.	No. 1512	No. 1517	No. 1522	No. 1527